


# COLOCACIÓN PRECISA STENTS ESOFÁGICOS SEGMENTADOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. Micro-Tech Endoscopy cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos asequibles y de alta calidad. Nuestra endoprótesis esofágica segmentada se ajusta a las estenosis esofágicas de derivación y permite una mayor flexibilidad que puede resultar más cómoda para los pacientes.

El sistema de liberación tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta de la endoprótesis en el sitio deseado. Nuestra línea de stents esofágicos combina la flexibilidad y la fuerza radial consistente para ayudar a la resolución de la estenosis.



# PRINCIPALES VENTAJAS

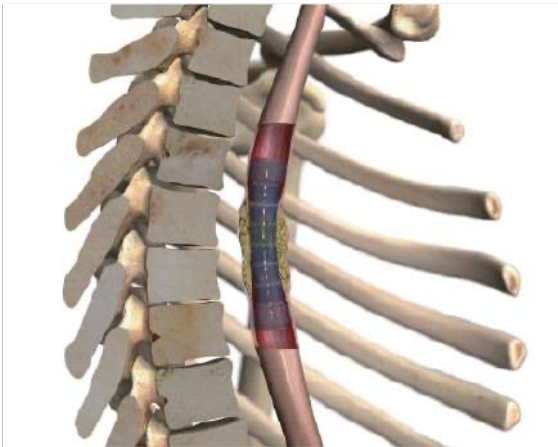

## MARCADOR RADIOPACO

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

## MOVIMIENTO INDEPENDIENTE

El stent modular segmentado permite un movimiento independiente entre cada sección, lo que maximiza la adaptación con la anatomía curva o tortuosa.

## RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados junto con la exclusiva construcción segmentada pueden reducir la migración dentro de la luz del esófago.

## HILOS PARA REPOSICIONAMIENTO

Los hilos están situados en los extremos distal y proximal del stent para permitir su reposicionamiento o retirada inmediatamente después de su colocación.



# ESPECIFICACIONES

| Ref              | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| NST61-224-18.060 | 18                       | 60                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-18.080 | 18                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-18.100 | 18                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-18.120 | 18                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-18.140 | 18                       | 140                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-18.160 | 18                       | 160                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.060 | 20                       | 60                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.080 | 20                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.100 | 20                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.120 | 20                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.140 | 20                       | 140                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-20.160 | 20                       | 160                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.060 | 22                       | 60                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.080 | 22                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.100 | 22                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.120 | 22                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.140 | 22                       | 140                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST61-224-22.160 | 22                       | 160                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |

# COLOCACIÓN PRECISA

## STENTS ESOFÁGICOS TOTAL Y PARCIALMENTE CUBIERTOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. El Endoscopio Micro-Tech cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos de alta calidad y asequibles.

El sistema de despliegue tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta del stent en el sitio deseado.



### PRINCIPALES VENTAJAS

#### MARCADORES RADIOPACOS

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia de rayos X, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

#### FABRICADO CON UN SOLO ALAMBRE

Nuestros stents esofágico total y parcialmente cubiertos están trenzados con un único alambre de Nitinol, lo que reduce el riesgo de fractura en los puntos de conexión.

#### RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados pueden reducir la migración dentro del lumen esofágico.

# ESPECIFICACIONES

## COPA DOBLE PARCIALMENTE CUBIERTA

| Ref              | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| NST01-222-18.080 | 18                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-18.100 | 18                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-18.120 | 18                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-18.150 | 18                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-20.080 | 20                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-20.100 | 20                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-20.120 | 20                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-20.150 | 20                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-22.080 | 22                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-22.100 | 22                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-22.120 | 22                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-22.150 | 22                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-24.080 | 24                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-24.100 | 24                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-24.120 | 24                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-222-24.150 | 24                       | 150                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |

## COPA DOBLE TOTALMENTE CUBIERTA

| Ref              | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| NST01-224-18.080 | 18                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-18.100 | 18                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-18.120 | 18                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-18.150 | 18                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-20.080 | 20                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-20.100 | 20                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-20.120 | 20                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-20.150 | 20                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-22.080 | 22                       | 80                      | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-22.100 | 22                       | 100                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-22.120 | 22                       | 120                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-22.150 | 22                       | 150                     | 20/6,7                    | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-24.080 | 24                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-24.100 | 24                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-24.120 | 24                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST01-224-24.150 | 24                       | 150                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |

# ESPECIFICACIONES

## ANTIRREFLUJO PARCIALMENTE CUBIERTO

| Ref              | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| NST21-112-18.080 | 18                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-18.100 | 18                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-18.120 | 18                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-20.080 | 20                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-20.100 | 20                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-20.120 | 20                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-22.080 | 22                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-22.100 | 22                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-22.120 | 22                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-24.080 | 24                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-24.100 | 24                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-112-24.120 | 24                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |

## ANTIRREFLUJO TOTALMENTE CUBIERTO


| Ref              | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| NST21-114-18.080 | 18                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-18.100 | 18                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-18.120 | 18                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-20.080 | 20                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-20.100 | 20                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-20.120 | 20                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-22.080 | 22                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-22.100 | 22                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-22.120 | 22                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-24.080 | 24                       | 80                      | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-24.100 | 24                       | 100                     | 24/8                      | 650                      | 1/Caja  | SI           |
| NST21-114-24.120 | 24                       | 120                     | 24/8                      | 650                      | 1/Cajaa | SI           |



## EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

# STENTS BILIARES

La línea de stents biliares de Micro-Tech Endoscopy está disponible tanto para el sistema de alambre guía largo como para el de alambre guía corto, para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.

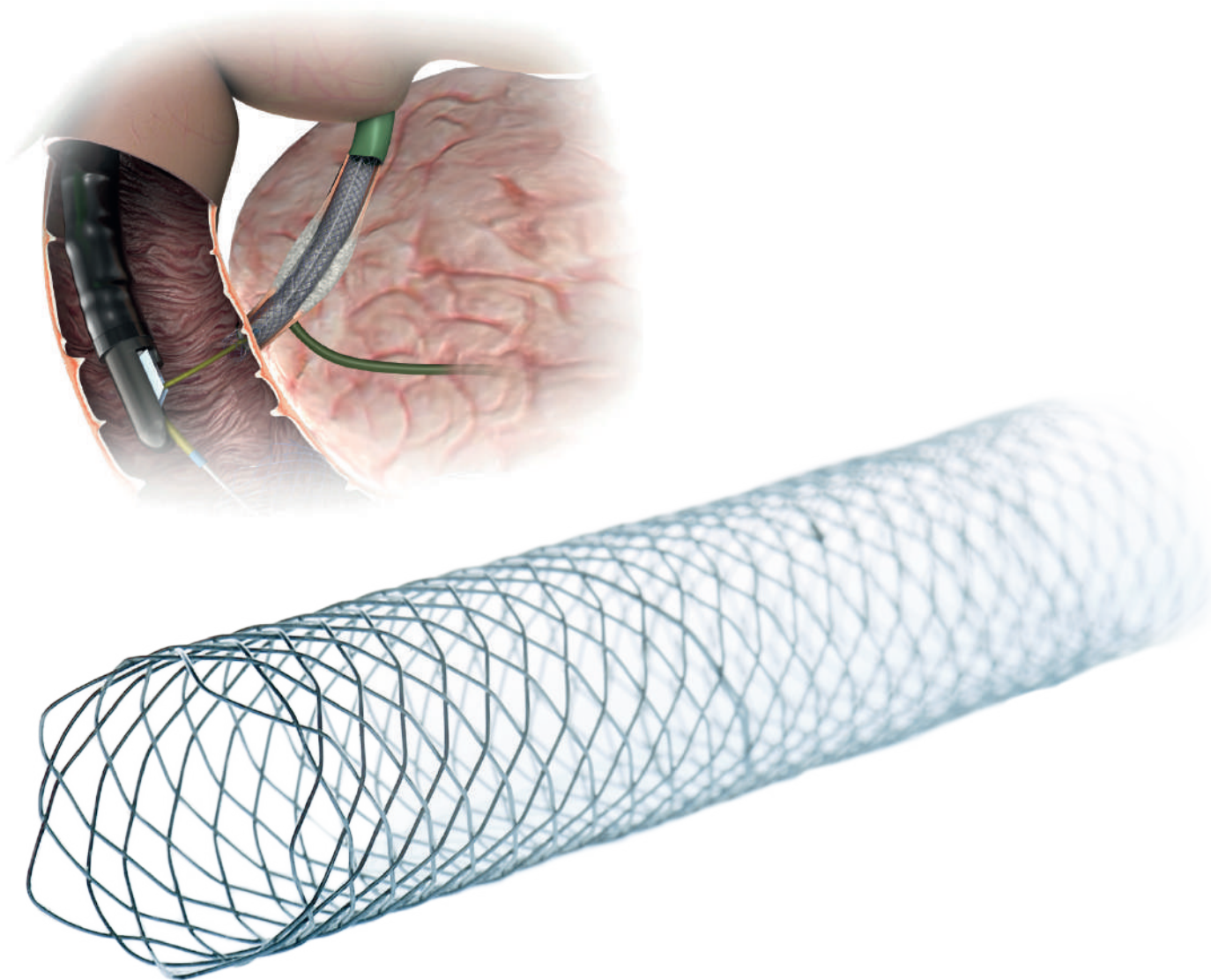

### PRINCIPALES VENTAJAS

#### EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

#### TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

#### HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.