

La solución mas completa para tratar la IUE en **procedimientos retropúbicos.**



PUNTA DE LA AGUJA

Su diseño facilita el pasaje de la aguja.

DIÁMETRO DE LA AGUJA

La aguja de 3,6 mm permite un pasaje controlado y seguro a través del espacio retropúbico.



BRAZO CONECTOR VERDE

Garantiza un contraste adecuado durante la cistoscopia.


Maniobra **de tres pasos**

REFERENCIAS DE POSICIÓN **HIGHLIGHT**



Sistema retropúbico premium de sling suburetral para el tratamiento de la IUE femenina.

Diseñado para brindar un procedimiento efectivo y seguro.

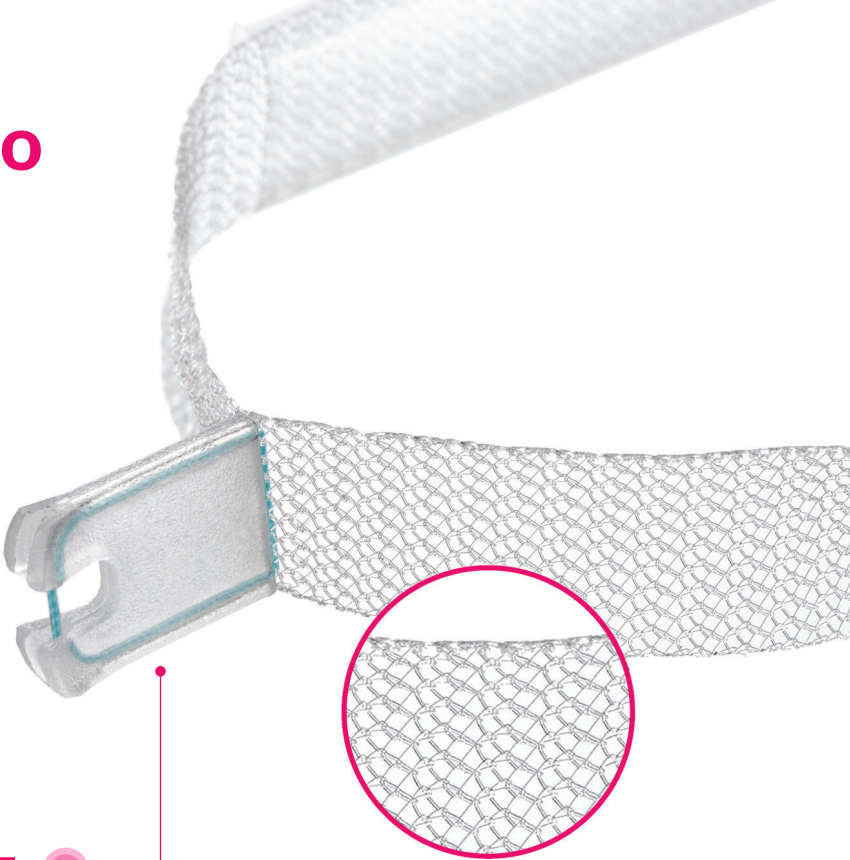

PESTAÑA DE POSICIONAMIENTO

Proporciona un posicionamiento fácil y controlado del sling.

SLING DE POLIPROPILENO TIPO I

Bordes termosellados que proporcionan un mejor soporte estructural. Sling de baja elasticidad.

FUNDA PROTECTORA

Minimiza la fricción y el daño a los tejidos durante el paso del sling.

MANGO ERGONÓMICO

El diseño ergonómico garantiza una maniobra precisa y controlada.

REFERENCIAS DE POSICIÓN

Ofrecen una referencia a la posición de la punta de la aguja durante las maniobras a ciegas.

COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE SLING RETROPÚBICOS

CARACTERÍSTICA	GYNECARE TVT EXACT SYSTEM ¹	ADVANTAGE FIT SYSTEM ²	STEEMA RETROPUBIC SLING SYSTEM ³	ATRIBUTO DIFERENCIAL
RADIO DE LA AGUJA	106.5 mm	82.5 mm	106.2 mm	Diseñado para rodear adecuadamente el pubis y reducir potencialmente la posibilidad de lesiones.
COLOR DE BRAZOS CONECTORES	Blanco	Azul	Verde	Garantiza el mejor contraste durante la cistoscopia.
PESTAÑA DE POSICIONAMIENTO	NO	SI	SI	Proporciona un posicionamiento fácil y controlado del sling.
FUERZA DE PASAJE DEL SLING ⁴	15.8 N	17.3 N	12.1 N	Diseñado para brindar un pasaje suave durante el posicionamiento del sling.
ÍNDICE DE ELASTICIDAD DEL SLING ⁵	3.7 mm/N	11.1 mm/N	2.9 mm/N	Alta resistencia a la deformación, lo cual evita un posible daño uretral.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

STEEMA RETROPUBIC SLING SYSTEM:

CÓDIGO DEL PRODUCTO: KIT-STEEMA-VS

1 | AGUJA RETROPÚBICA STEEMA CON MANGO

1 | SLING STEEMA

1 <http://www.ethicon.com/healthcare-professionals/products/uterine-pelvic/incontinence-slings/gynecare-tvt-exact-continencesystem#!description-and-specs>.
2 Información publicada por Boston Scientific: Ref.: WH-64918-AB FEB/2015
3 Datos en archivo. Propiedades de diseño de sling de Promedon.
4 Datos en archivo. Tamaño de la muestra de la prueba de banco: n=15. Es posible que los resultados de estos estudios no predigan los resultados en otros casos.
5 Datos en archivo. Prueba de banco. Es posible que los resultados de estos estudios no predigan los resultados en otros casos.



www.promedon-urologypf.com/steema

Promedon

Urology and Pelvic Floor

- AGUJA CON DISEÑO ERGONÓMICO
- FÁCIL POSICIONAMIENTO
- BAJA ELASTICIDAD



SISTEMA RETROPÚBICO PREMIUM DE SLING SUBURETRAL para el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo femenina.